

## XL Performance

Die SERVOX® digital XL erzielt durch ihre moderne Akku-Lösung und effizientes Strom-Management eine Steigerung der Akku-Laufzeit im Vergleich zur SERVOX® digital um 50 %\*.

## XL Flexibilität

Die SERVOX® digital XL gewährleistet durch wiederaufladbare Akkus, dem international einsetzbaren Reiseadapter sowie der hochwertigen Gürteltasche die nötige Unabhängigkeit.

## XL Qualität

Die SERVOX® digital XL vereint seit Jahrzehnten die bewährten Technologien mit modernsten Komponenten und erstklassigen Materialien.

### Technische Daten Akku-Ladegerät

VARTA Typ	57677
Akkugröße	AAA, AA, 9V, Gerät
Ladesystem	Nickel-Metall-Hydrid (NiMH)
Ladezeit	4 Stunden**

### Technische Daten Reiseadapter

Spannung	100 V – 240 V
Maximale Leistung	660 W bei 100 V und 1350 W bei 230 V

### Lieferumfang SERVOX® digital XL

SERVOX® digital XL Sprechhilfe, 1 x Ladegerät, 2 x SERVOX® digital XL Batteriehalter, 1 x SERVOX® digital Gürteltasche, 1 x SERVOX® digital Trageschnur mit Ersatz-Schnurschoner, 1 x SERVOX® digital Mundrohr mit Adapter, 1 x SERVOX® digital Schraubkappe „weicher Ton“, 1 x kwmobile Universal Reiseadapter, 1 x Gebrauchsanweisung

### Bestellinformationen

Bezeichnung	VE	Hilfsmittelnr.	PZN	Bestell-Nr.
SERVOX® digital XL Sprechhilfe	1	12.99.05.1003	14162692	37575
SERVOX® digital Mundrohr mit Adapter	1	12.99.99.0900	14162700	18253
SERVOX® digital Schraubkappe „weicher Ton“	1	12.99.99.0900	14162723	23285
SERVOX® digital Schraubkappe „harter Ton“	1	12.99.99.0900	14162746	22774
SERVOX® digital XL Datenkabel	1	12.99.99.0900	14162717	37535
SERVOX® digital Software	1	12.99.99.0900	–	38029

\* Durchschnittliche Akku-Laufzeit unter Werkseinstellungen im Dauerbetrieb | \*\* Abhängig von der Zellkapazität: Basierend auf 4AA 1600mAh | \*\*\* Abrechnungsnummer



**SERVOX® digital XL**  
Eine sichere Form der  
Kommunikation




# SERVOX® digital XL

## Eine sichere Form der Kommunikation

### XL Performance – XL Flexibilität – XL Qualität

Die **SERVOX® digital XL** ist die qualitativ hochwertige Neuauflage der **SERVOX® digital**. Mit ihrem modernen Strom-Management und der deutlich verlängerten Akku-Laufzeit von mehr als 50%\* wurde die bisherige Performance und Flexibilität weiter ausgebaut. Im Gesamtbild bietet die **SERVOX® digital XL** eine zeitgemäße Stimmrehabilitation von laryngektomierten und tracheostomierten Patienten.

#### Akku-Laufzeit

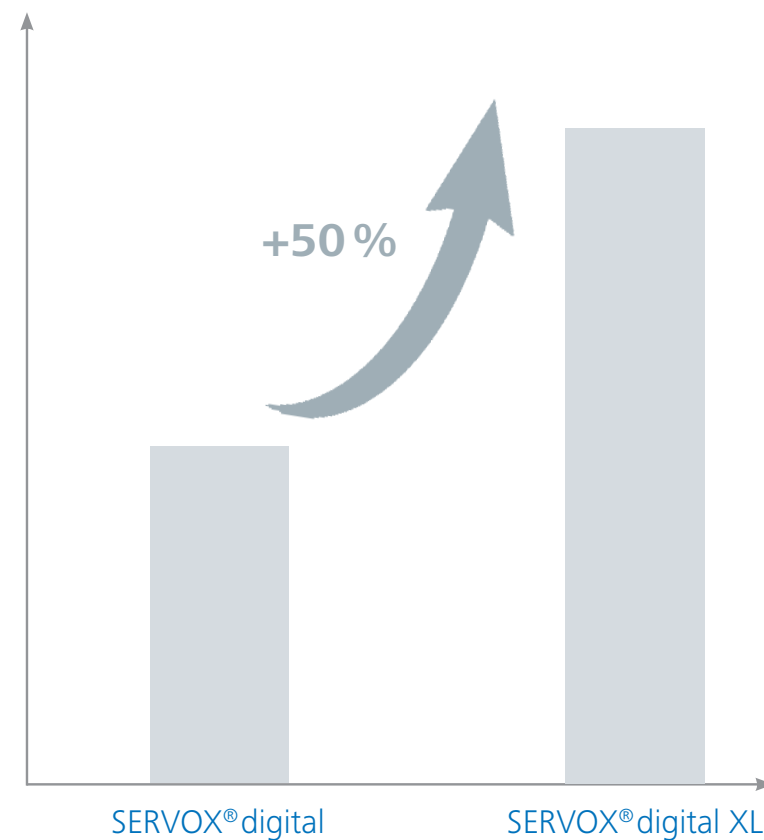

\* Durchschnittliche Akku-Laufzeit unter Werkseinstellungen im Dauerbetrieb

#### Optimierung der Akku-Performance




Das neue Strom-Management der **SERVOX® digital XL** beinhaltet die wiederaufladbaren Akkus, die zu einer Steigerung der Laufzeit im Vergleich zur **SERVOX® digital** um 50%\* führen. Die handelsüblichen Akkus schaffen eine neue Unabhängigkeit und Flexibilität.

#### Lademanagement mit Funktionalität



Das neue Ladegerät der **SERVOX® digital XL** ist deutlich handlicher als das Ladegerät der **SERVOX® digital** und verfügt über einen integrierten USB-Anschluss. Somit können zeitgleich die Akkus und beispielsweise ein Mobiltelefon geladen werden.

#### Internationalität im Fokus

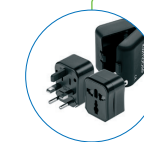


Der im Lieferumfang enthaltene Reiseadapter garantiert auch im Ausland ein einfaches und schnelles Aufladen der **SERVOX® digital XL**. Durch hochwertige Materialien und einfache Bedienung ist der Reiseadapter ein zuverlässiger Begleiter auf Reisen in 150 Ländern.

#### Individualität bei Tonfrequenz und Klangqualität




Mit der manuellen Grundeinstellung lassen sich eine Vielzahl von individuellen Einstellungen wie Tonfrequenz und Klangqualitäten vornehmen und speichern. Erweiterte Einstellungen können mit Hilfe der optional verfügbaren Software spezifiziert werden.

#### Variabilität der Klangnuancen

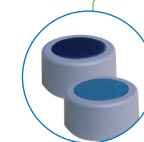

Eine zusätzliche Individualisierung der Klangnuancen bieten die zwei Schraubkappen der **SERVOX® digital XL**. Mit der harten oder weichen Schraubkappe können die richtigen Nuancen eingestellt werden.

#### Erweiterung des Einsatzbereichs

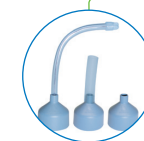

Mit einer vielfältigen Auswahl an Mundrohradaptern kann die **SERVOX® digital XL** bereits unmittelbar nach der Kehlkopfentfernung und während der Bestrahlungszeit benutzt werden und schont somit den sehr empfindlichen Hals.

#### Unabhängigkeit durch Mobilität



Die **SERVOX® digital** Gürteltasche schützt zusätzlich die **SERVOX® digital XL** und ist der optimale Begleiter im Alltag. Das integrierte Fach am Boden bietet Platz für den zweiten Batteriehalter inklusive den eingelegten Akkus und sichert so auch unterwegs die nötige Mobilität.